

## VEILEDNING TIL HÅRPRØVETAKING FOR DNA-BASERT SLEKTSKAPSKONTROLL

**Utstyr for prøvetaking:** Tang/pinsett, maskeringstape (eller liknende), papirkonvolutt.

1. Det anbefales at hårprøvene tas i nakken på grisen, der det ofte er kraftige hår med store hårsekker.

2. Bruk en tang/pinsett og samle sammen en liten tuft med hår.


Klem tangen godt sammen og napp ut hårene.



Hårsekkene må være med, ellers må prøvene tas på nytt! Det er i hårsekkene at DNA'et er.


3. Hårprøven bindes som en pen, jevn bunt med tape ca 1-2 cm fra enden av hårroten.

Napp ut hår og samle i bunten til du har minimum 20 hårstrå med hårsekker.

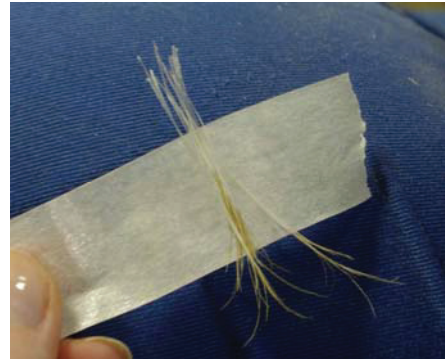

4. Merk prøven med både medlemsnummer og individnummer.

*Er individnummer ukjent, nummerer prøvene slik at de kan spores tilbake til grisen de ble tatt fra.*

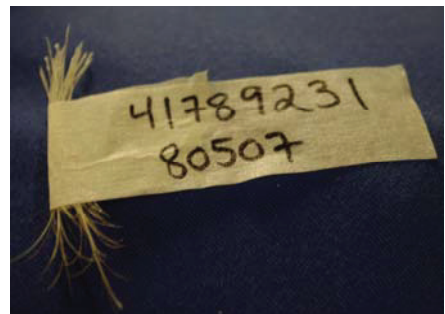

5. Legg prøvene i en papirkonvolutt sammen med skjemaet for farskapstest, og send til:

**BioBank AS  
Holsetgt 22  
2317 Hamar**